



HISTÓRIA



ESTRATÉGIAS



PORTFOLIO



CHEMBIO

DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA



**JORNADA
DIGITAL DO
PACIENTE**



**PRESENÇA NO
BRASIL**



SURE CHECK® HIV



**TECNOLOGIA
DPP®**

Líder em diagnósticos *point-of-care* com foco na detecção e diagnóstico de doenças infecciosas.




1985
Hauppauge - Nova Iorque - EUA



Medford - Nova Iorque - EUA



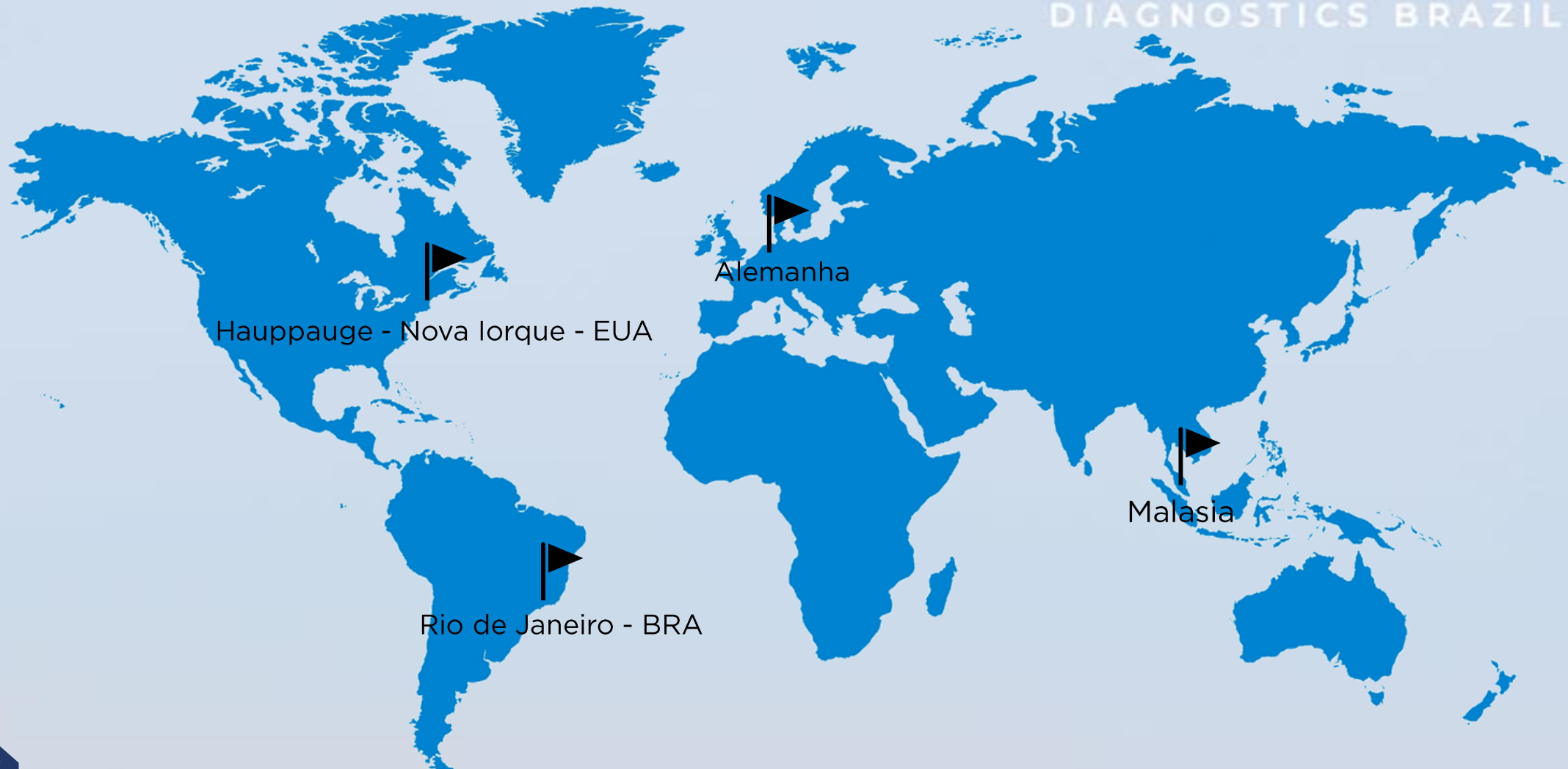

Hauppauge - Nova Iorque - EUA

Alemanha

Malasia

Rio de Janeiro - BRA



HISTÓRIA



Nossa Missão

Desenvolver e comercializar testes rápidos, fáceis de usar e confiáveis que melhorem o diagnóstico e o monitoramento de doenças.

Nossa Visão

Reduzir a incidência e o fardo das doenças em todo o mundo.



HISTÓRIA

COLABORAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS



HISTÓRIA

BIOSYNEX REALIZA AQUISIÇÃO DA CHEMBIO DIAGNOSTICS

**CHEMBIO**
DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA



COMMUNIQUE DE PRESSE Strasbourg, le 27 avril 2023 – 23H30

BIOSYNEX

REALISATION DE L'ACQUISITION DE CHEMBIO DIAGNOSTICS, INC.

CHEMBIO DIAGNOSTICS, Inc. devient la première structure nord-américaine contrôlée par BIOSYNEX

BIOSYNEX (ALBIO), un leader français spécialisé dans la conception et la distribution de tests rapides, annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition de CHEMBIO DIAGNOSTICS, Inc. ("CHEMBIO"), une société leader dans le domaine du diagnostic Point of Care, spécialisée dans les maladies infectieuses. CHEMBIO fait désormais partie du Groupe BIOSYNEX. La complémentarité des technologies et du portefeuille de produits ainsi que la combinaison des opportunités de marché seront d'importants vecteurs de croissance. Par ailleurs, d'importantes synergies opérationnelles sont anticipées au niveau des achats, de la logistique de la R&D et de la production.



HISTÓRIA

© 2021 Chembio. All Rights Reserved

PLATAFORMAS DE TESTES RÁPIDOS



	5µL	10µL	2,5µL
	15 min	15 min	15 min
Sensibilidade	99,7%	99,8%	99,7%
Especificidade	99,9%	100%	99,9%

PRODUTOS APROVADOS GLOBALMENTE

FDA

DPP HIV-Syphilis System
 DPP Zika IgM
 DPP Ebola Antigen (EUA)
 DPP HIV-1/2
 HIV 1/2 STAT-PAK
 SURE CHECK HIV-1/2

CE

Chagas STAT-PAK
 DPP HIV 1/2 Assay
 DPP HIV Syphilis Assay
 DPP RAGP
 DPP Reader
 DPP SARS CoV-2 Ag
 DPP SARS CoV-2 IgM/IgG
 DPP Syphilis Screen & Confirm
 DPP Zika IgG/IgM System
 HIV 1/2 STAT-PAK
 SURE CHECK HIV Self-Test
 SURE CHECK HIV-1/2

Pré Qualificado OMS

DPP HIV 1/2 Assay
 HIV 1/2 STAT-PAK
 SURE CHECK HIV-1/2
 SURE CHECK HIV-1/2 Self-Test

INTERNACIONAL

Chagas STAT-PAK Assay	DPP SARS CoV-2 Ag
DPP Chikungunya System	DPP SARS CoV-2 IgM/IgG
DPP COVID-19 IgM/IgG System	DPP Syphilis Screen & Confirm Assay
DPP Dengue IgM/IgG System	DPP ZCD IgM/IgG System
DPP Dengue NS1 Antigen System	DPP Zika IgG/IgM System
DPP HIV Syphilis System	DPP Zika IgM System
DPP Leishmaniasis Assay	HIV 1/2 STAT-PAK Assay
DPP RAGP	SURE CHECK HIV Self-Test
DPP Reader	SURE CHECK HIV-1/2 Assay



PORTFOLIO

ANVISA

SURE CHECK® HIV Self-Test

SURE CHECK® HIV-1/2 Assay

Dengue Check NS1

Dengue Check IgG/IgM

DPP® HIV/Syphilis Combo System

DPP® Respiratory Antigen Panel

DPP® SARS CoV-2 Ag

Micro Reader

* DPP ZCD IgM/IgG System

* AMNIOQUICK

* PREMAQUICK

* Autoteste Gluten

* EM BREVE



1985

- Hauppauge
Nova Iorque
EUA



2004

- Parceria com
Bio-Manguinhos/Fiocruz
- TR HIV

2007

- TR DPP HIV



2008

- TR DPP HIV –
ORAL FLUID
- TR DPP LEPTO
- TR DPP LVC

2010–2015

- TR DPP SYP
- TR DPP SYP DUO
- TR DPP HIV/SYP COMBO
- DPP MICRO READER
- Imunoblot Rápido (DPP
HIV CONFIRMATORY)




**PRESENÇA NO
BRASIL**

2019
TR DPP ZCD



2020
TR DPP
COVID-19
IgM/IgG

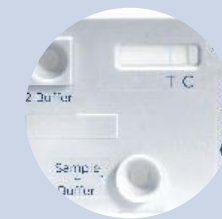

2022
DPP Resp Ag
Panel
Sure Check
HIV ST



2016-2018
TR DPP Zika IgM/IgG
TR DPP Chik IgM/IgG
TR DPP Dengue
IgM/IgG
TR DPP Dengue NS1

2019
CHEMBIO
DIAGNOSTICS
BRAZIL

2021
TR DPP
COVID-19 Ag



**PRESENÇA NO
BRASIL**

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DPP® PATENTEADA


Vantagens do percurso duplo para a reação (amostra) e a revelação dos resultados

A tecnologia DPP® separa o caminho da amostra e o caminho do conjugado. Esta é a base central da patente DPP®;

Membranas separadas permitem o controle do fluxo da amostra e a ligação do analito à linha de teste, o que permite a multiplexação avançada (vários alvos no mesmo teste);

Semelhante a tecnologia ELISA laboratorial, a plataforma DPP® inclui um curto tempo de incubação que maximiza a sensibilidade dos testes;

O tampão libera um conjugado que limpa o fundo e melhora o contraste, permitindo a interpretação quantitativa quando usado com os leitores óticos da Chembio;

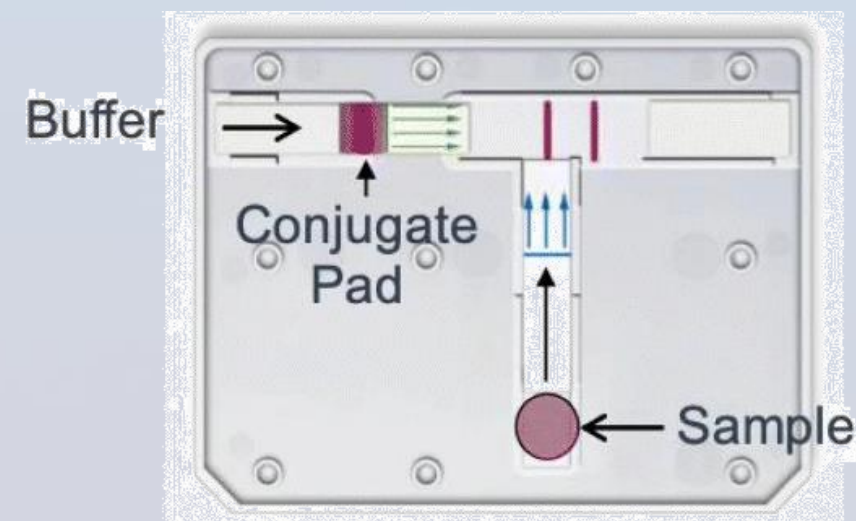

TECNOLOGIA
DPP®



PLATAFORMA TECNOLÓGICA DPP® PATENTEADA

Vantagens do percurso duplo para a reação (amostra) e a revelação dos resultados

A análise simultânea das tiras superior e inferior permite a detecção de anticorpos IgM e IgG, ou detecção de anticorpos e antígenos, com amostra única;

Permite a utilização de uma ampla matriz de amostra (sangue total, plasma, soro, fluido oral, fezes, urina);

Etapa de depleção patenteada para melhorar a sensibilidade e/ou especificidade;

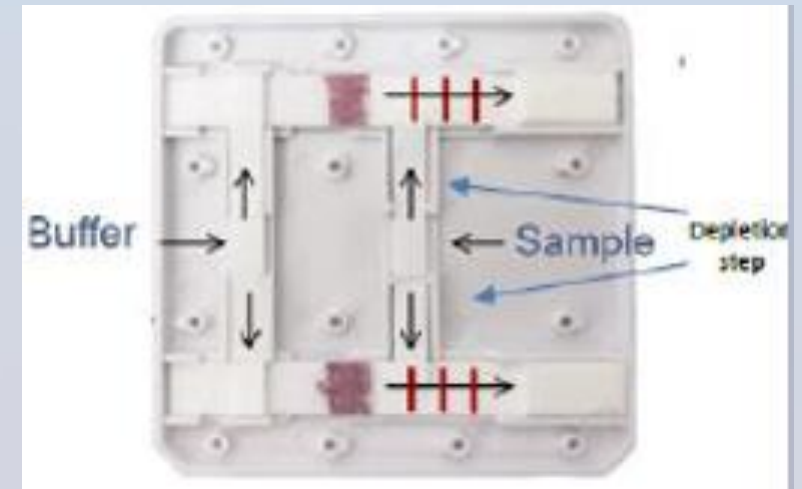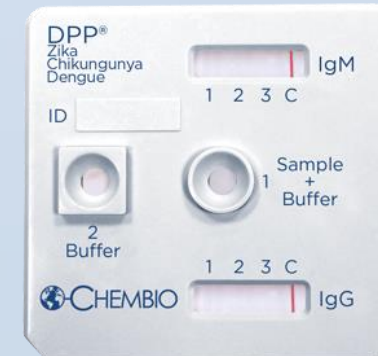

TECNOLOGIA
DPP®



Plataforma Tecnológica DPP® Patenteada

Exemplos de testes com um único alvo (*single assay*) e com vários alvos (*Multiplex assay*)

DPP® Zika and DPP® Ebola Tests



DPP® Zika Antibody Assay
FDA 510 approved

DPP® Ebola Antigen
FDA- EUA approved

DPP® Fever Panel Africa
(Funded by Paul Allen Foundation)



DPP® Fever Antigen Assay

- Malaria pLDH
- Malaria HRPII
- Pan Ebola (VP40)
- Lassa (NP)
- Marburg (VP40)
- Dengue NS1
- Chikungunya (E1,E2)
- Zika (NS1)

DPP® Fever Panel Asia
(Funded by FIND)



Antigen Detection

- ChikV E1, E2
- Malaria pLDH
- Burkholderia p. CPS
- ZikV NS1
- Malaria HRPII
- Dengue NS1


IgM Antibody Detection

- ZikV
- ChikV
- DenV
- Rickettsia typhi
- Orientia tsutsugamushi
- leptospira.
- Burkholderia



TECNOLOGIA DPP®

 **CHEMBIO**
DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA

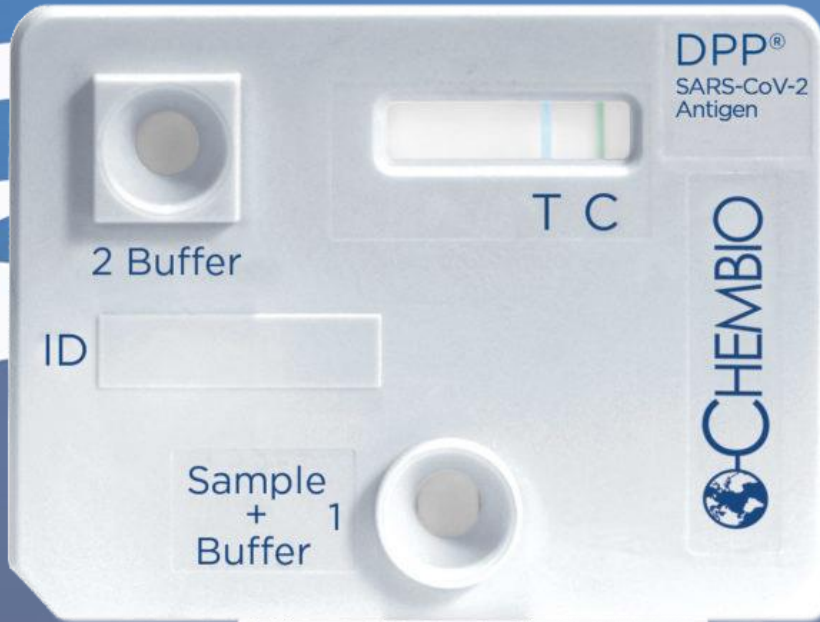



Chembio Diagnostics Systems – Leitores DPP® Micro Reader

Os leitores DPP® Micro Reader são dispositivos portáteis aprovados pela ANVISA, com marca CE, para a leitura automatizada dos testes DPP®.

Nosso leitor agiliza a experiência da testagem no local de atendimento com resultados rápidos e precisos.

Micro Reader



- Cabe na palma de sua mão
- Minimiza erros humanos devido à interpretação visual subjetiva
- Livre de manutenção

Micro Reader II



- Fácil de usar: botão único
- Treinamento mínimo
- Resultados rápidos e precisos

ESCALONAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO POR AUTOMAÇÃO



Inteligente

Controle de qualidade via visão guiada e operação robótica



Flexível

Permite montagem de várias configurações de testes em uma mesma linha




Eficiente

Reduz custos variáveis de produção



SURE CHECK® HIV

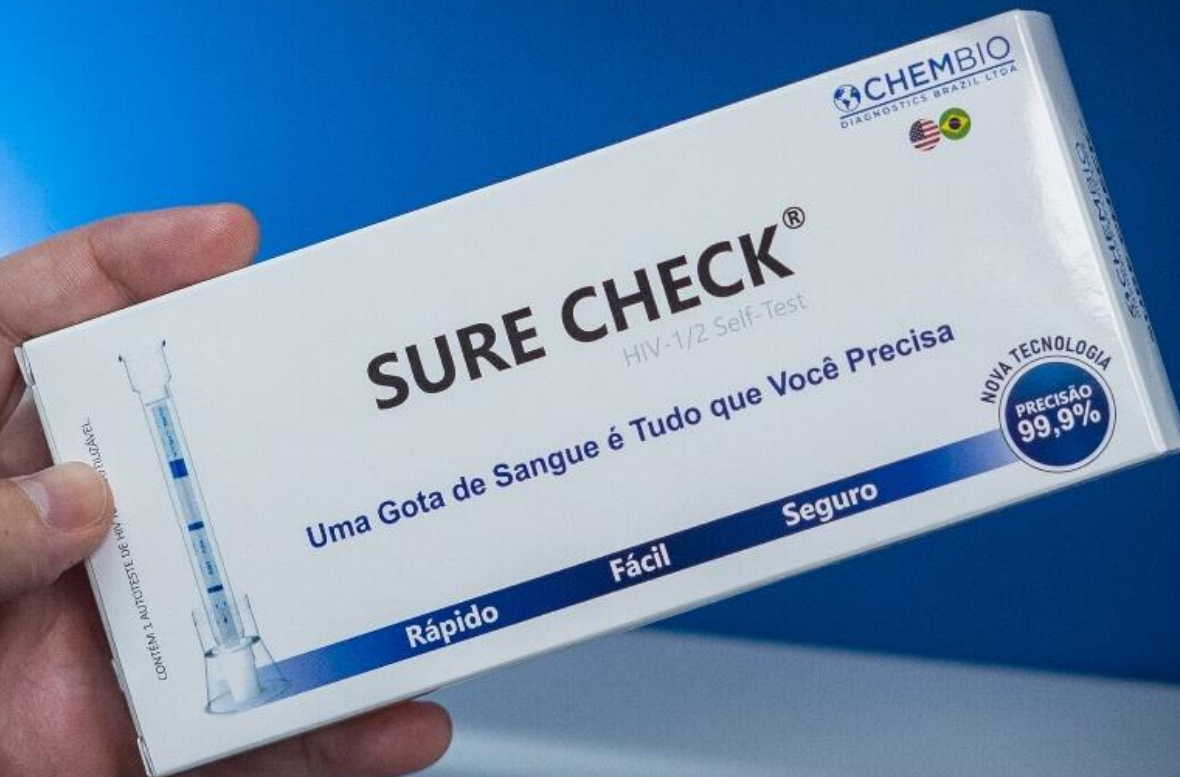

SURE CHECK[®] HIV



SURE CHECK[®] HIV

Rápido

Resultado em 15 minutos



Fácil

Design exclusivo / 2,5µL



Seguro

Precisão de 99,9%



SURE CHECK[®] HIV

Países que utilizam o autoteste Sure Check[®] HIV-1/2

Brasil
França
Portugal
Filipinas
Taiwan
África do Sul
Uganda
Quênia
Zâmbia




Países que estão implementando

Malawi - registro aprovado
Zimbábue - registro aprovado
Nigéria - registro em fase de conclusão
Lesoto
Chile
Argentina
Colômbia

CONTEÚDO DO KIT



CONTEÚDO DO KIT

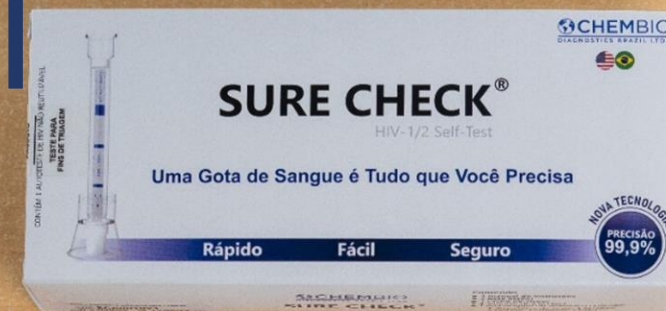

CONTEÚDO DO KIT

Alcool swab


Gaze

Suporte solução tampão

Dispositivo de teste

Curativo

Lanceta

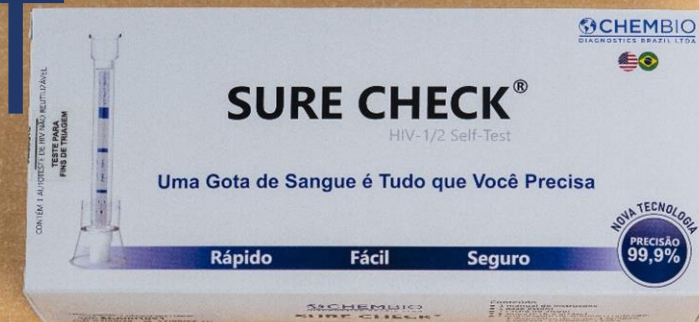


REALIZAÇÃO DO TESTE



REALIZAÇÃO DO TESTE



REALIZAÇÃO DO TESTE

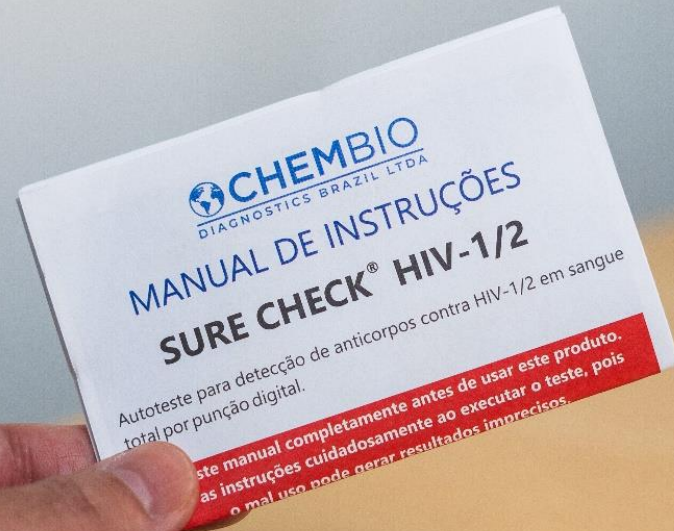


REALIZAÇÃO DO TESTE


PROCEDIMENTO DE TESTE

- 1 PREPARE**
POSICIONE O SUPORTE DO TESTE NUMA SUPERFÍCIE PLANA COM A BASE MAIOR PARA BAIXO.
- ABRA O SACHÊ DO TESTE NO PICOTE (→→→)
- RETIRE A CÁPSULA DO TAMPÃO DO DISPOSITIVO DE TESTE
- INSIRA A CÁPSULA DO TAMPÃO NO SUPORTE DO TESTE
CÁPSULA DO TAMPÃO
LACRE
CÁPSULA DO TAMPÃO NA POSIÇÃO FINAL
- ABRA O SACHÊ DE ALCÓOL E A GAZE ESTERIL
- LIMPE O DEDO COM ALCÓOL E DEIXE SECAR
- ENCOSTE A PARTE VERMELHA DA LANCETA E PRESSIONE FIRMEMENTE PARA PERFORAR A PELE. APORTE O DEDO SUAVEMENTE PARA FORMAR UMA GOTA DE SANGUE.
TIRE A TAMPÃO DA LANCETA
CLICK!
- PREENCHA A PONTA DO DISPOSITIVO DE TESTE COM SANGUE
- FAÇA**
POSICIONE O DISPOSITIVO VERTICALMENTE ACIMA DO SUPORTE DO TESTE
EMPURRE FIRMEMENTE ATRAVÉS DO LACRE DE ALUMÍNIO ATÉ O FUNDO.
1ª Click
2ª Click
3ª Click
- VERIFIQUE SE HÁ UM FLUXO DE COR ROSA EM ATÉ 1 MINUTO
FLUXO ROSA
NÃO HÁ FLUXO ROSA
SE NÃO HOUVER FLUXO ROSA, EMPURRE O DISPOSITIVO DE TESTE MAIS FUNDO NA CÁPSULA DO TAMPÃO.

REALIZAÇÃO DO TESTE

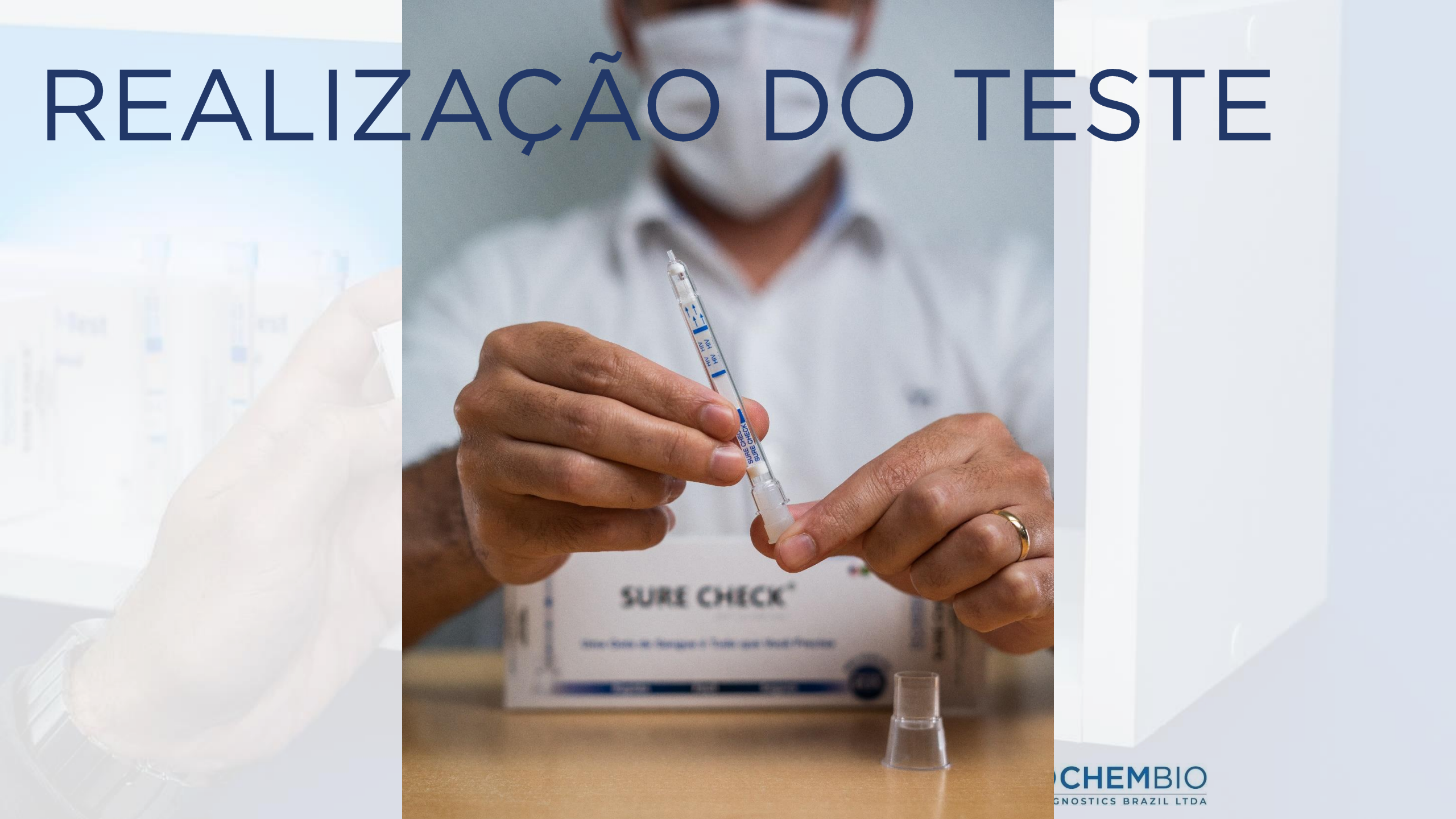


REALIZAÇÃO DO TESTE

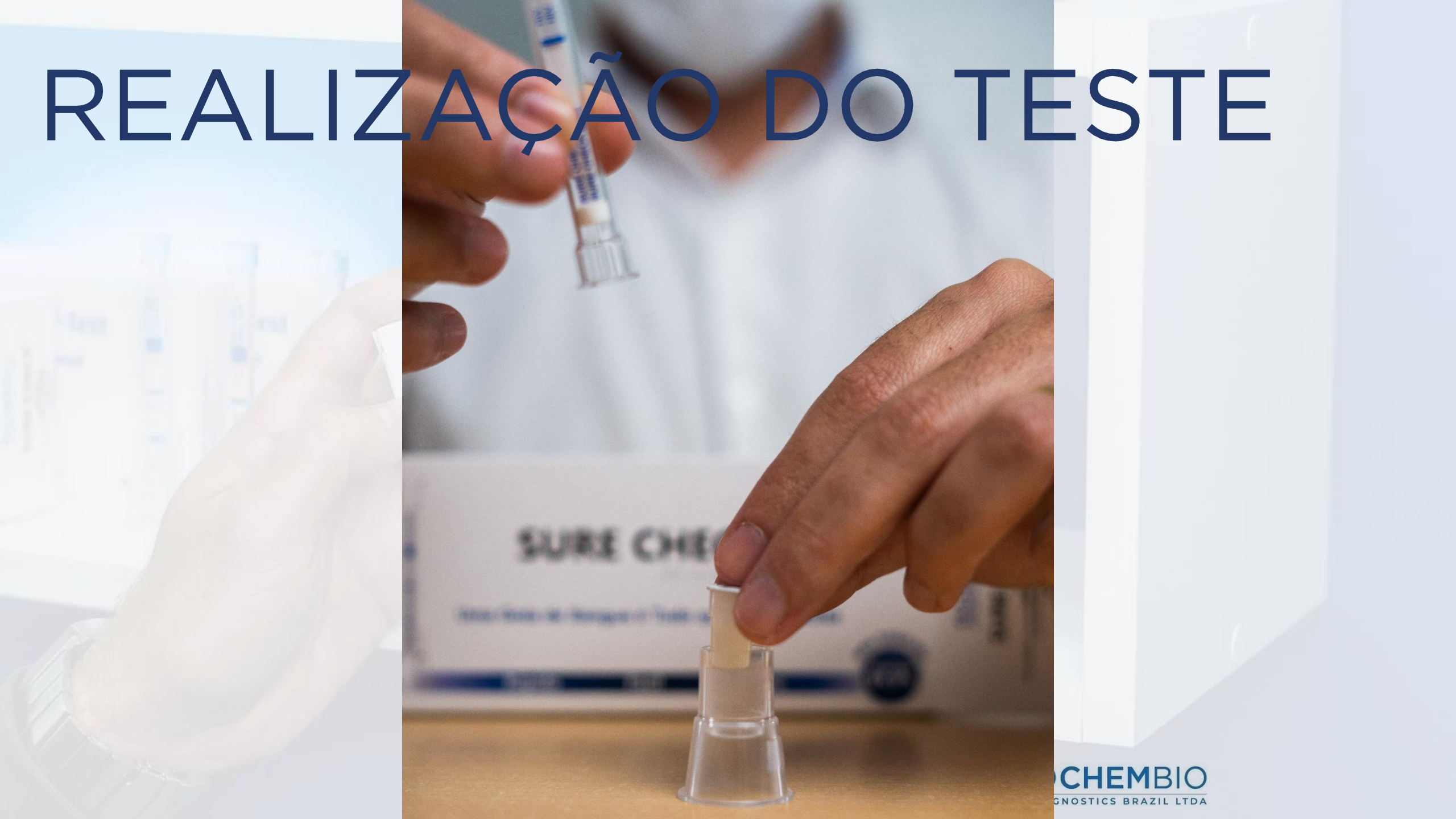


REALIZAÇÃO DO TESTE




REALIZAÇÃO DO TESTE

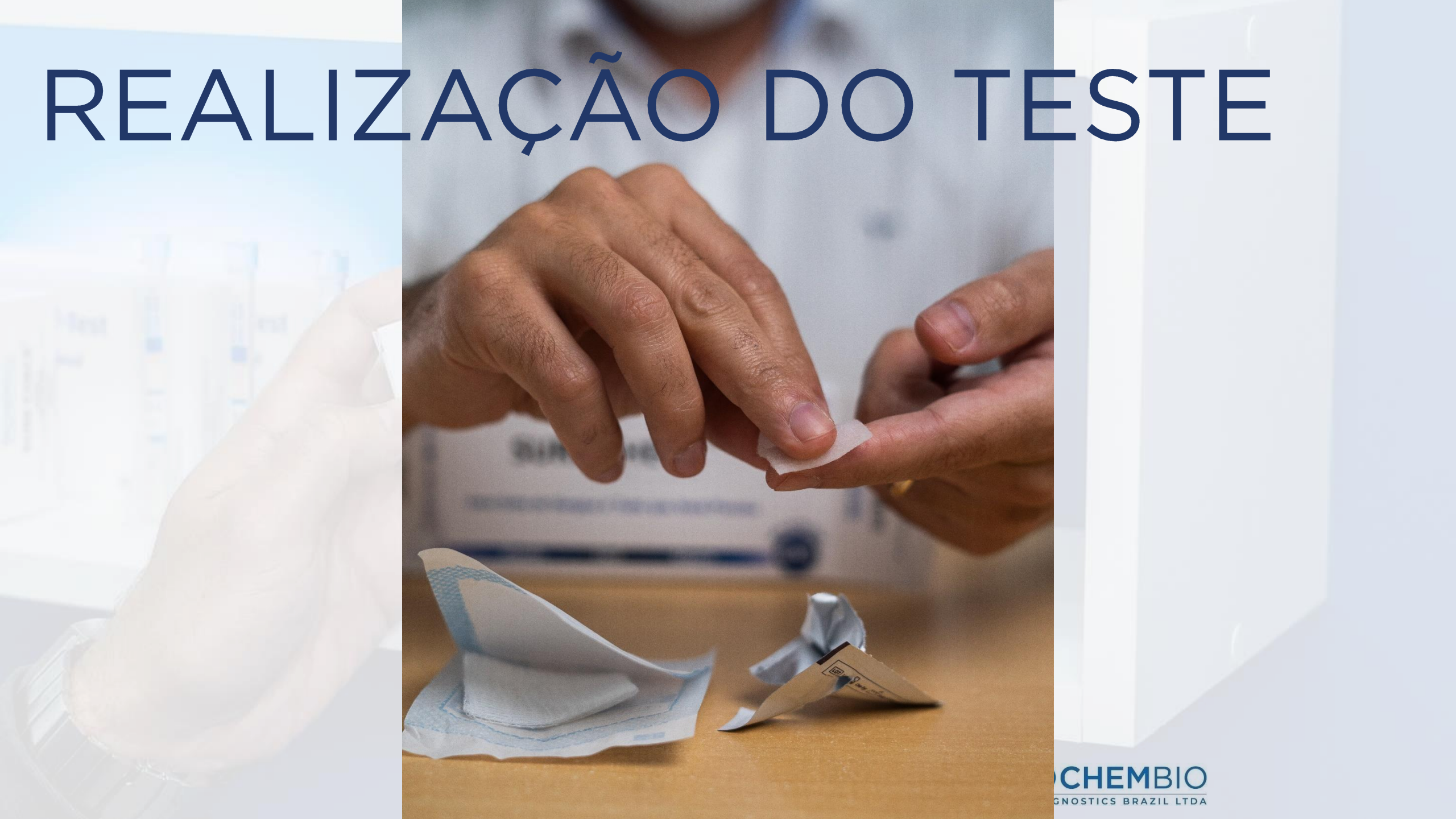

REALIZAÇÃO DO TESTE

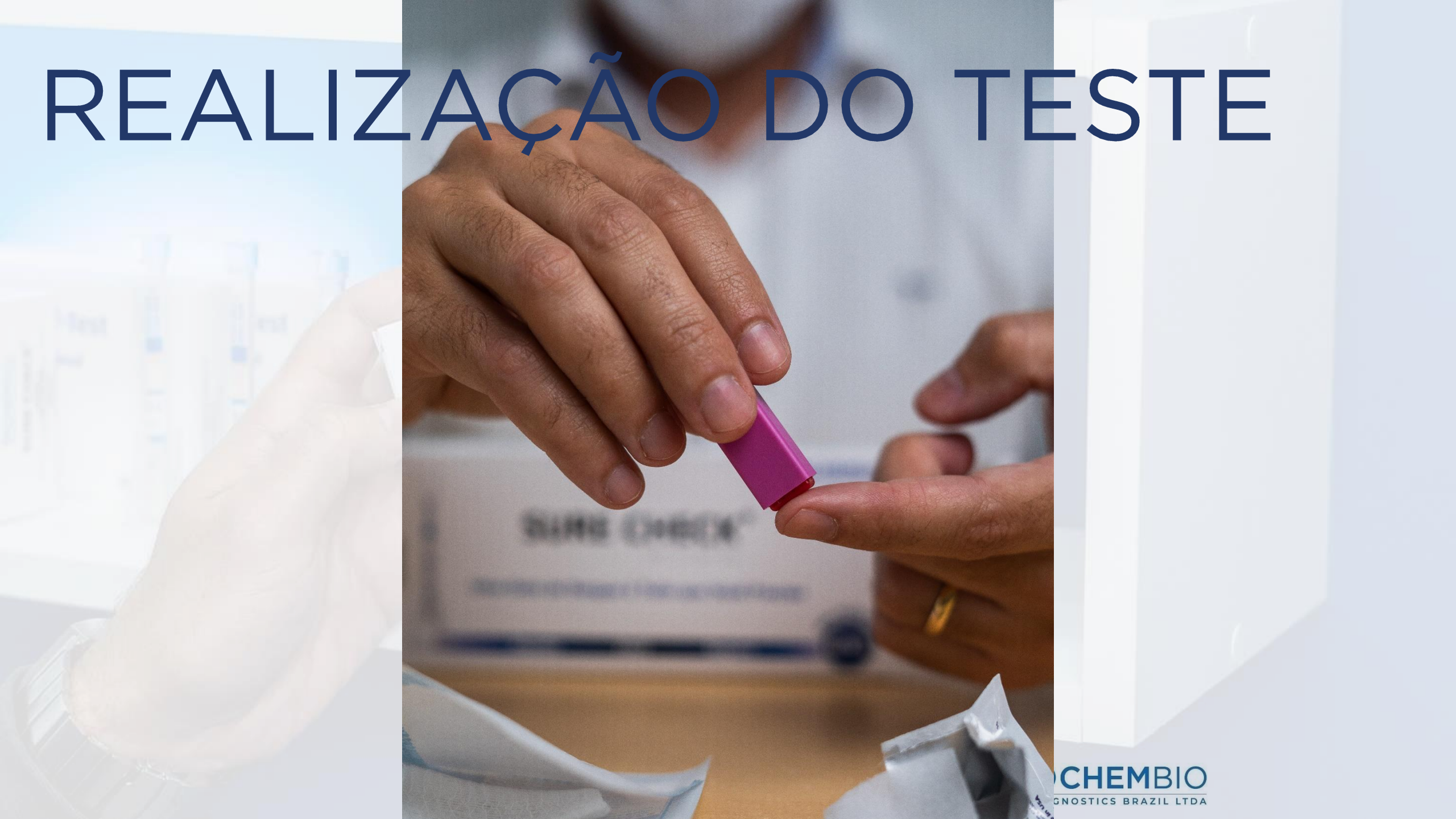

REALIZAÇÃO DO TESTE

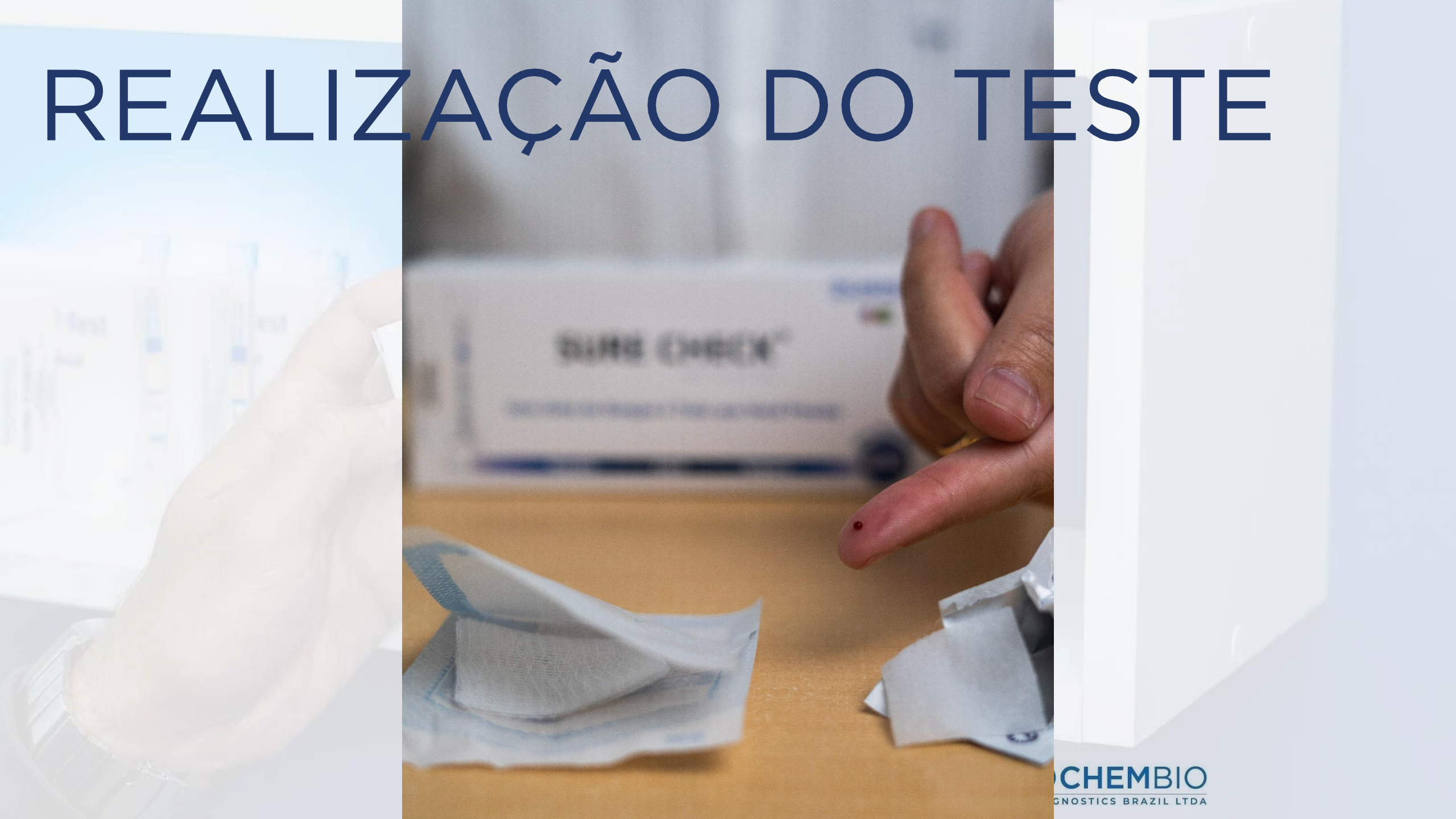


REALIZAÇÃO DO TESTE




REALIZAÇÃO DO TESTE



REALIZAÇÃO DO TESTE

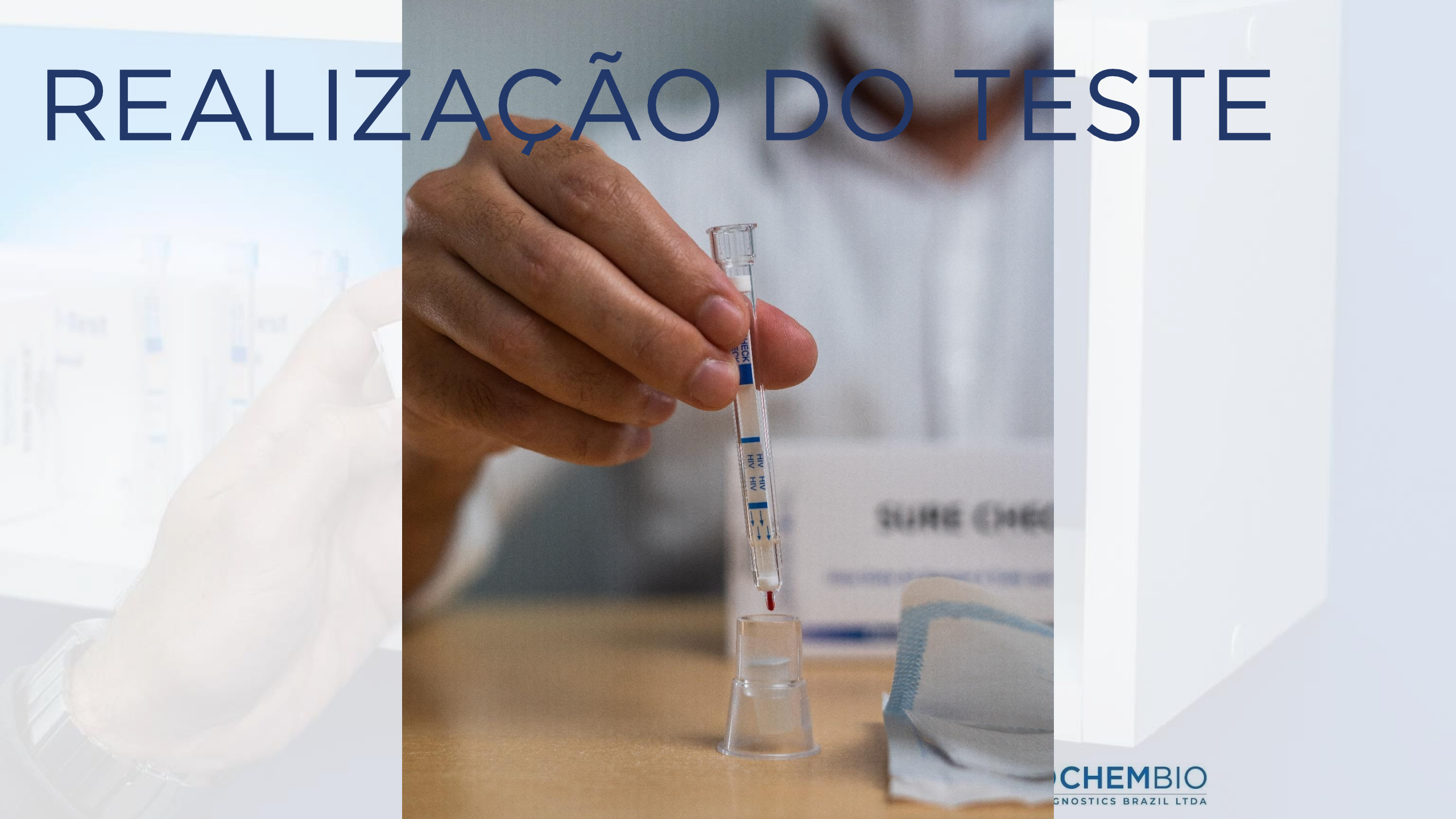


REALIZAÇÃO DO TESTE

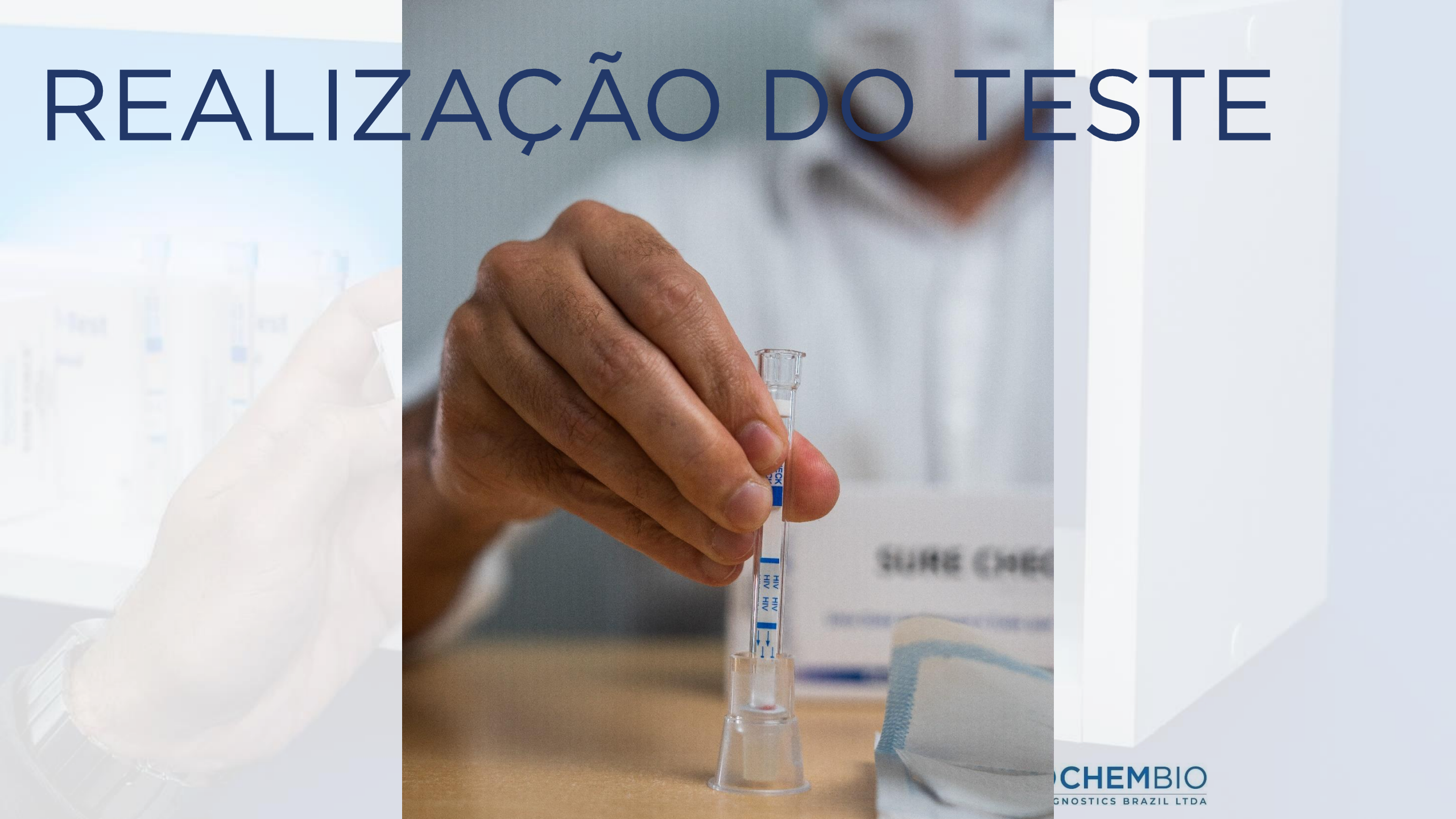


REALIZAÇÃO DO TESTE



REALIZAÇÃO DO TESTE

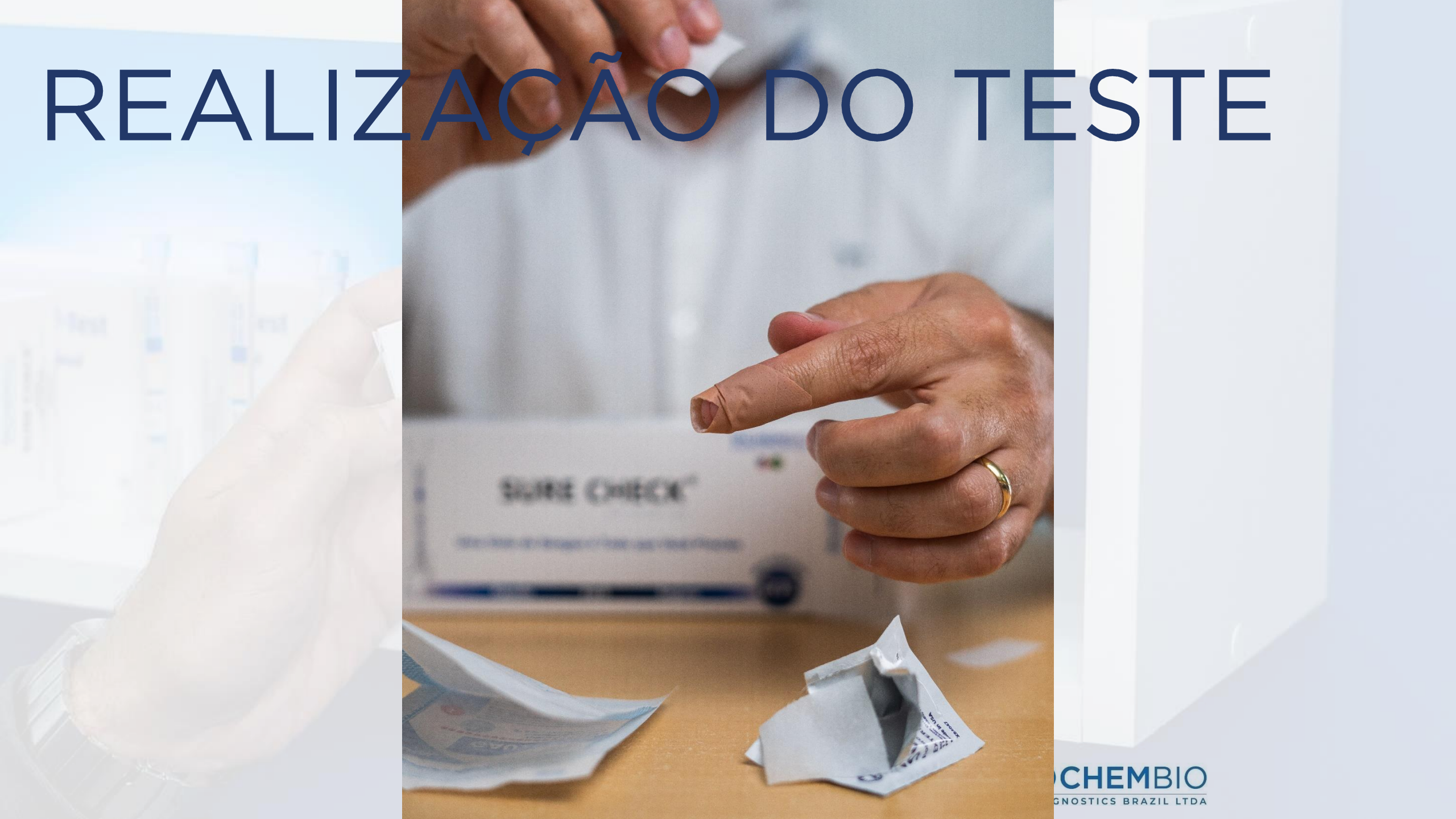

REALIZAÇÃO DO TESTE

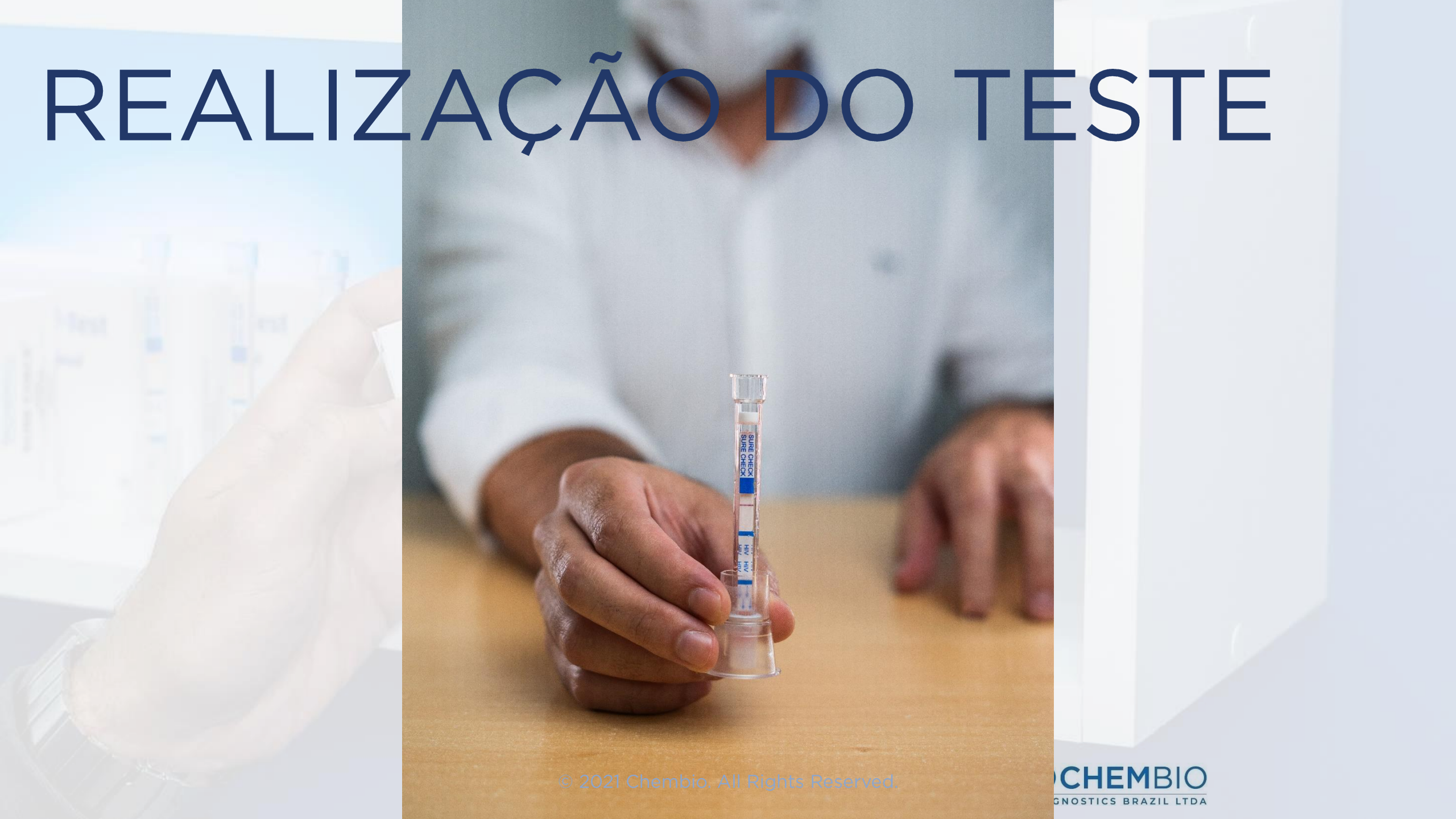

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO



INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO



RESULTADO NÃO REAGENTE

Se o seu autoteste se parece com o exemplo abaixo, o resultado é negativo (não reagente).

**1 linha visível:
a linha controle.**



RESULTADO REAGENTE

Se o seu autoteste se parece com um dos exemplos abaixo, o resultado é positivo (reagente).

**2 linhas visíveis:
a linha controle e a linha teste.**




RESULTADO INVÁLIDO

Se o seu autoteste se parece com um dos exemplos abaixo, o resultado é inválido.




DISPENSAÇÃO

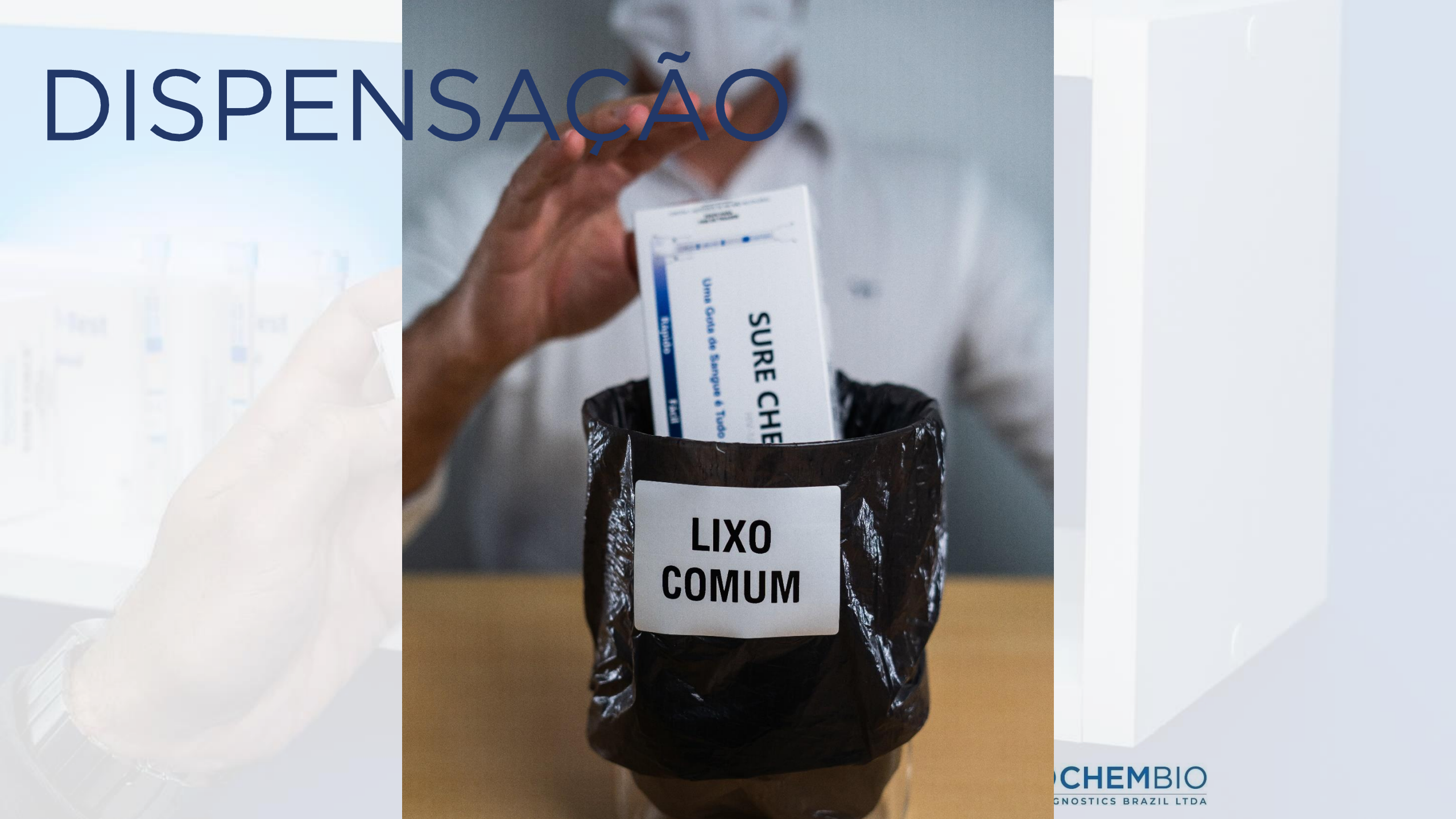

APRESENTAÇÕES



AUTOTESTE

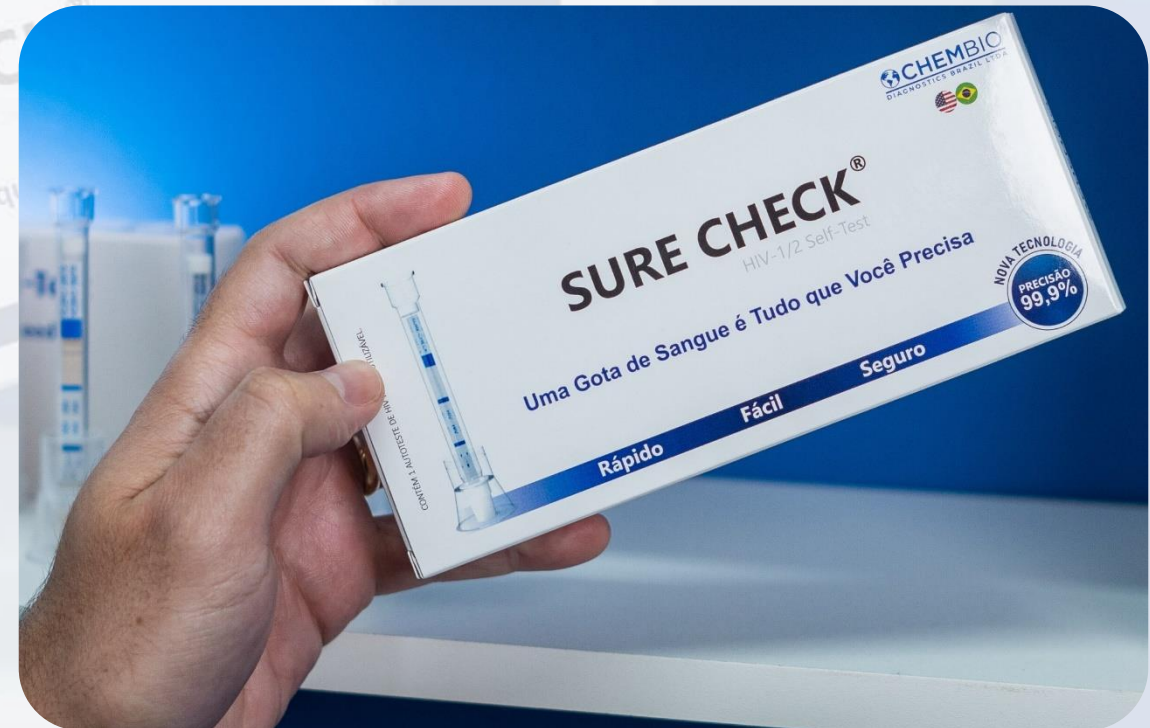

VERSÃO PROFISSIONAL



VENDA EM FARMÁCIAS



PRINCIPAIS CLIENTES CHEMBIO

1st  Droga **Raia** |  **DROGASIL**

2nd  drogarias **Pacheco** |  Drogaria **São Paulo**


3rd  **Pague Menos** |  **extrafarma**

4th  **FARMÁCIAS São João**

7th  **CLAMED**
FARMÁCIAS

9th  **DROGARIA VENANCIO**

~7,558 stores

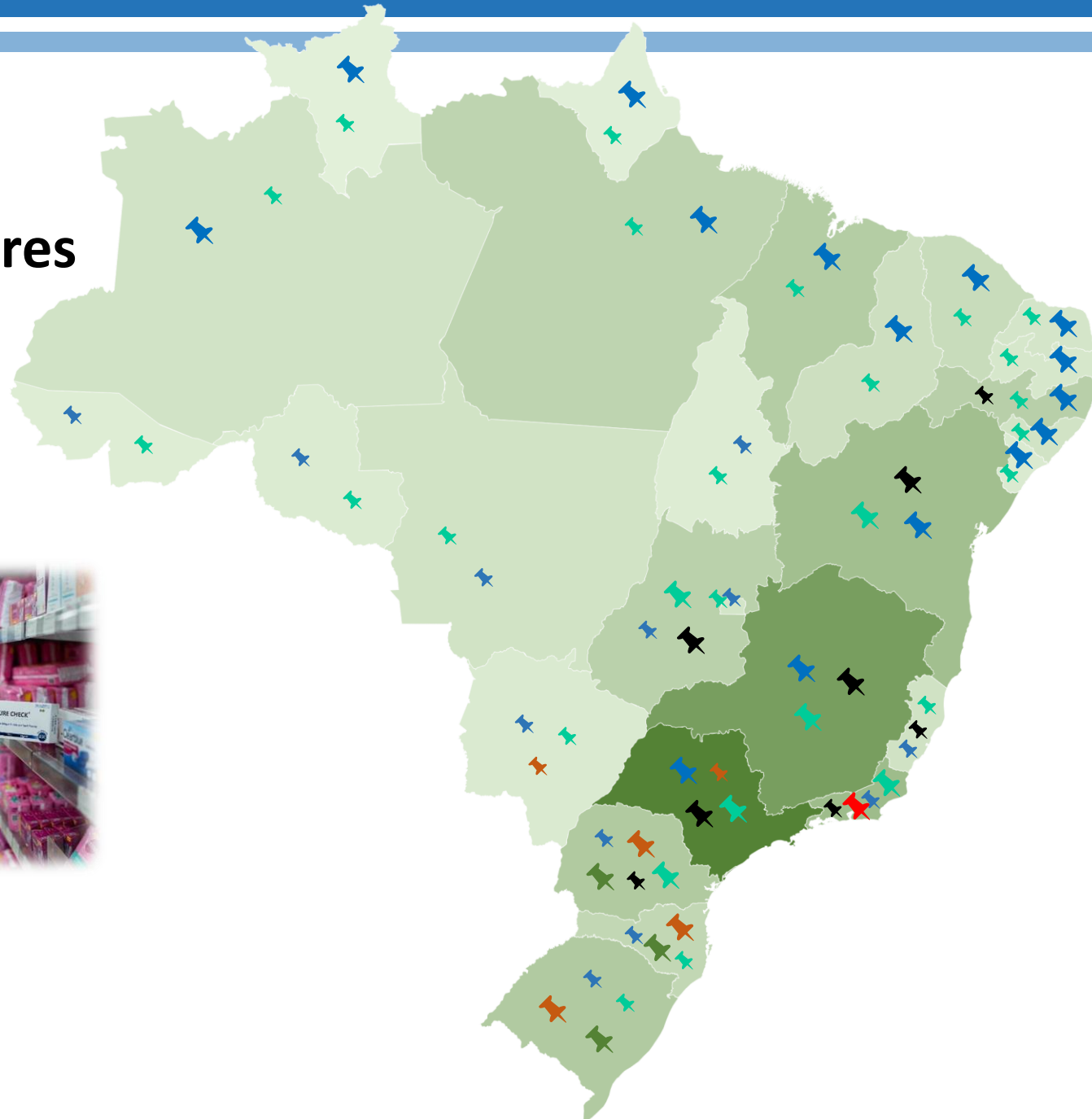

MARKET SHARE NO BRASIL - AUTOTESTES DE HIV - SELL IN YTD



Período: **MES** 09/2023 08/2023 07/2023 06/2023 05/2023 04/2023 03/2023 02/2023 01/2023 12/2022 11/2022 10/2022 09/2022 08/2022 07/2022 06/2022 05/2022 04/2022 03/2022 02/2022 01/2022 12/2021 11/2021 10/2021 09/2021 08/2021 07/2021 06/2021 05/2021 04/2021 03/2021 02/2021 01/2021 12/2020 11/2020 10/2020


Passar a Móvel

Medidas: **Unidades**

TOTAL PAIS

Dimensão: Fabricante Corporação

Gráfico: Gráfico Tabela

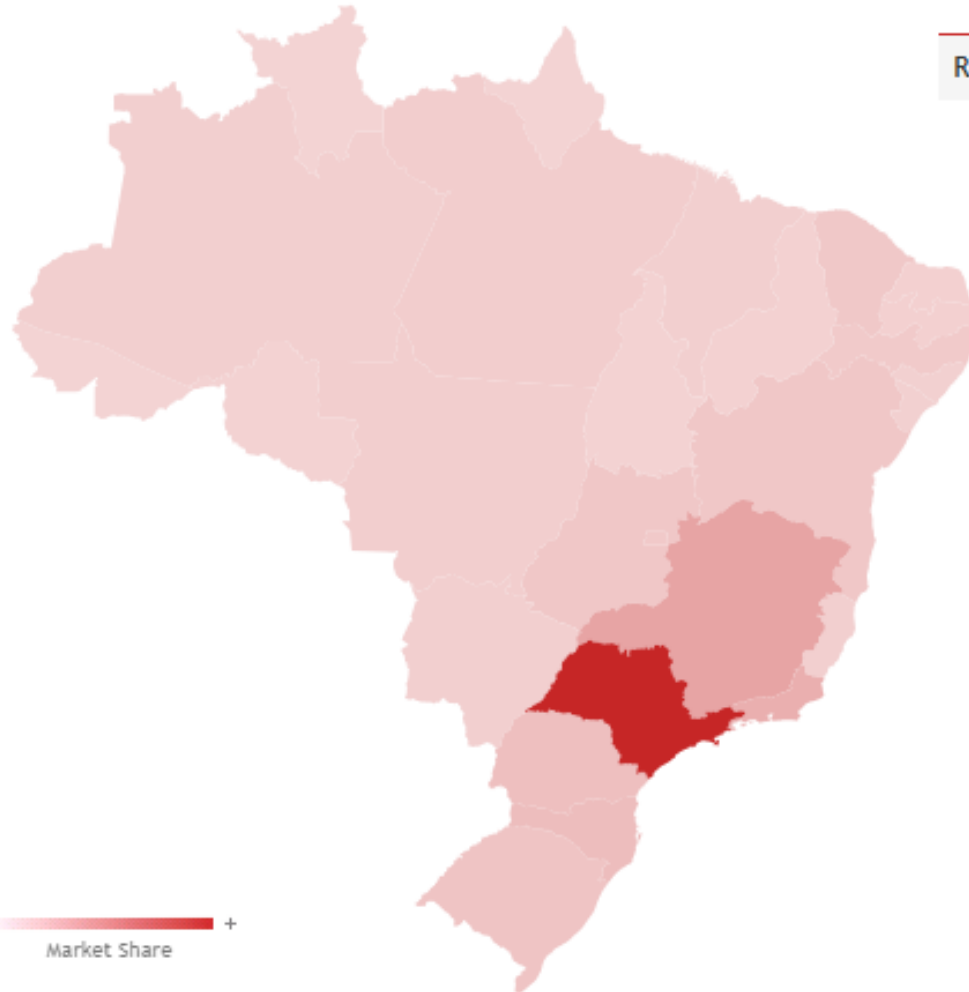

TOP 20

RKG	FABRICANTE	UNIDADES	% MS	RKG	PRODUTO	UNIDADES	% MS
1	CHEMBIO DIAGNO...	31.991,00	74,2906	13	SURE CHECK	31.991,00	1,0466
2	ABBOTT	5.773,00	13,4063	24	PANBIO	5.773,00	0,1889
3	ECO DIAGNOSTICA	3.999,00	9,2866	29	ECO HIV DETECT	3.999,00	0,1308
4	ORANGE LIFE	1.277,00	2,9655	41	ACTION AUTOT...	1.277,00	0,0418
5	GENOMMA LAB	22,00	0,0511	72	ORAQUICK ORAL	22,00	0,0007



Autoteste para HIV sem fim diagnóstico apenas para triagem. Para obter um resultado confirmatório procure um laboratório de sua confiança.

CHEMBIO
DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA
SURE CHECK[®]
Organização Mundial da Saúde CE

SAC
0800-887-1589
24 horas/todos os dias
Gratuito Ministério da Saúde
Disque saúde: 136

CHEMBIO
DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA



Vamos fazer o teste Juntos?
leia o código

SURE CHECK[®]

HIV-1/2 Self-Test

Uma Gotinha de Sangue é Tudo que Você Precisa

Rápido

Fácil

Seguro

NOVA TECNOLOGIA
PRECISÃO
99,9%

NÃO RECEBER O PRODUTO NÃO REUTILIZÁVEL

TESTE PARA FINS DE TRIAGEM

CONTÉM 1 AUTOTESTE



JORNADA
DIGITAL DO
PACIENTE

Vamos
fazer o teste
Juntos?

leia o código





Autoteste HIV-1/2 Sure Check

Realize o autoteste HIV de forma segura e guiada. Inicie o passo a passo clicando abaixo.



Iniciar autoteste

Por que fazer o teste é importante?


Entenda como o autoteste funciona, para quais situações é indicado e fatores que você deve ter atenção.





Autoteste HIV-1/2 Sure Check

Realize o autoteste HIV de forma segura e guiada.
Inicie o passo a passo clicando abaixo.

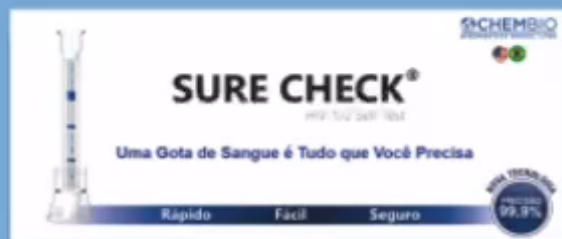

[Iniciar autoteste](#)

Por que fazer o teste é importante?


Entenda como o autoteste funciona, para quais situações é indicado e fatores que você deve ter atenção.

eserved.



Autoteste HIV-1/2 Sure Check

Realize o autoteste HIV de forma segura e guiada.
Inicie o passo a passo clicando abaixo.

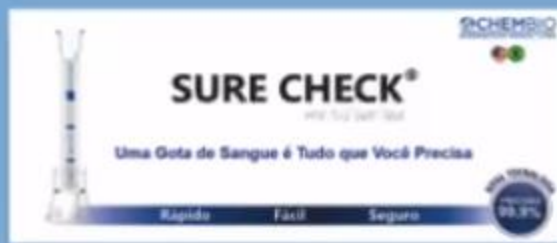

[Iniciar autoteste](#)

Por que fazer o teste é importante?

Entenda como o autoteste funciona, para quais situações é indicado e fatores que você deve ter atenção.

Passo 1 - Preparar o autoteste

1. Pegue o suporte do teste e coloque em uma superfície plana com a base maior para baixo.
2. Abra o sachê do teste e pegue o dispositivo.
3. Retire a cápsula do tampão do dispositivo e insira no suporte com o lacre para cima.
4. Abra o álcool e o use para limpar o dedo. Espere secar.



Continuar

Voltar

Passo 2 - Coletar amostra

1. Retire a tampa da lanceta (dispositivo com ponta perfuradora) e encoste a parte vermelha no dedo limpo.
2. Pressione firmemente para perfurar a pele.
3. Aperte o dedo até formar uma gota de sangue.
4. Preencha a ponta do dispositivo de teste com o sangue.



Continuar

Voltar

Passo 3 - Fazer o teste

1. Posicione o dispositivo verticalmente acima do suporte do teste.
2. Empurre firmemente através do lacre até o fundo. Você sentirá 3 clicks.
3. Veja se há fluxo de cor rosa no dispositivo.
4. Abra a gase estéril para limpar o dedo e coloque o curativo.



Se o fluxo rosa não aparecer em até 1 minuto, empurre o dispositivo de teste mais fundo na cápsula. [Clique aqui para verificar a posição correta do dispositivo.](#)



Continuar

Passo 3 - Fazer o teste

1. Posicione o dispositivo verticalmente acima do suporte do teste.
2. Empurre firmemente através do lacre até o fundo. Você sentirá 3 clicks.
3. Veja se há fluxo de cor rosa no dispositivo.

Fechar x

Tudo pronto com seu teste?

Marque 15 minutos para ver o resultado. Inicie a contagem do tempo e, enquanto isso, siga para os próximos passos.

Voltar

Continuar

Continuar

Passo 4 - Responder o questionário

Preencha as informações abaixo para contribuir com pesquisas que ajudam no enfrentamento do HIV. As respostas são voluntárias, você deve respondê-las completamente ou seguir sem informar.



As respostas não serão de forma alguma vinculadas à sua identidade, CPF ou demais formas de identificação, mantendo sigilo.



Preencher usando minha localização

1. Qual seu Estado?

Pesquise Estado



2. Qual sua Cidade?

Pesquise Cidade



3. Qual sua idade?

Insira a idade em anos

4. Qual seu gênero?

TECNOLOGIA

PRECISÃO 99,9%

São Paulo



2. Qual sua Cidade?

Pesquise Cidade



3. Qual sua idade?

40

4. Qual seu gênero?

Homem



5. Qual sua orientação sexual?

Heterossexual



6. Qual sua escolaridade?

Superior completo



Declaro que li e aceito os [Termos de Uso para Pacientes](#) e [Política de Privacidade](#) e que informei corretamente os dados solicitados para uso de serviços de saúde com a Clinicarx.

Seguimos a Lei nº 14.289/2022 e a Lei 13.709/2018 quanto ao sigilo e segurança das informações que você está disponibilizando nesta jornada.


© 2021 Chembio. All Rights Reserved.

Passo 5 - Informe o resultado

Clique na imagem que mais se parece com o resultado que você vê no seu autoteste.



A intensidade da cor das linhas no dispositivo podem variar e mesmo os tons mais claros devem ser considerados.

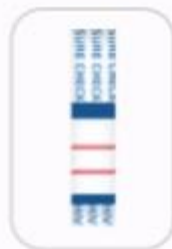

Continuar

Voltar

TECNOLOGIA
ACURACIA
99,9%

Passo 5 - Informe o resultado

Clique na imagem que mais se parece com o resultado que você vê no seu autoteste.



A intensidade da cor das linhas no dispositivo podem variar e mesmo os tons mais claros devem ser considerados.

Fechar x

Você esperou os 15 minutos?

A leitura do resultado deve ser realizada após o tempo indicado. Continue para o próximo passo se você já fez o procedimento.

Aguardar

Continuar

Continuar

Voltar

Passo 6 - Informar dados para o cartão de resultados

Insira corretamente todos os dados da pessoa que fez o autoteste, para que eles apareçam no cartão de resultado.



O preenchimento é voluntário. Você poderá seguir sem informar, porém, seu cartão de resultados ficará sem identificação.

1. Informe seu nome completo

2. Insira seu CPF

3. Informe seu e-mail

Seguimos a Lei nº 14.289/2022 e a Lei 13.709/2018 quanto ao sigilo e segurança das informações que você está disponibilizando nesta jornada.

Continuar

Passo 7 - Informar tempo de exposição

Estamos quase lá! Insira qual o período de ocorrência do risco de contato com o vírus, para receber a melhor orientação relativa ao seu resultado.

Há quanto tempo você suspeita do contato com o HIV?

- Até 3 dias
- 4 dias até 29 dias
- 30 dias ou mais

Gerar cartão de resultado


Voltar

[REDACTED]

CPF: ****.***.***-57

Localidade: São Paulo - SP

Resultado Não Reagente

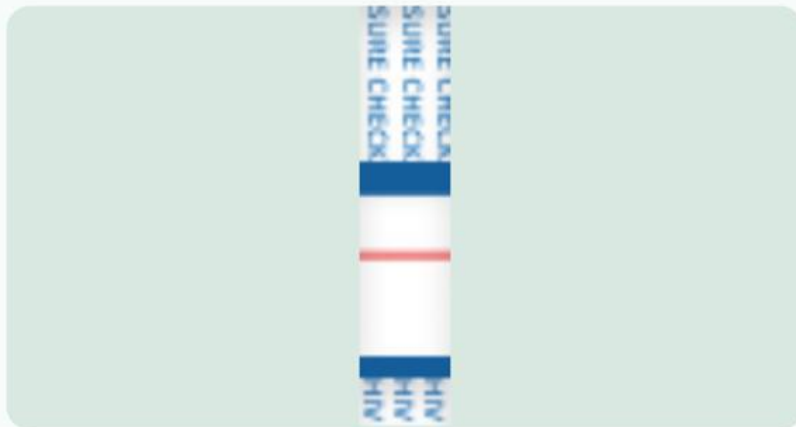

Tipo de Teste: Autoteste HIV-1/2 Sure Check

Data de Registro: 16/12/2022

Este resultado é relativo a declaração registrada pelo próprio paciente que realizou o teste. O autoteste não configura um exame laboratorial e esse cartão de resultado não tem valor legal e nem de laudo oficial.

Autoteste HIV-1/2 Sure Check

Não Reagente

resultado indicativo de sorologia
negativa para HIV



Gostaria de falar com um médico?



Realizar consulta médica

Nossa farmacêutica tem uma orientação
importante para você. Confira:

clinarx

Ativar som



00:12

Exame de triagem



15:06



Você informou risco de exposição a mais de 30 dias. Se mesmo com este resultado não reagente você ainda suspeita de infecção pelo HIV, recomendamos que você faça um novo teste em 30 dias.

O que fazer agora?

Busque por centro de testagem e aconselhamento próximos a você. Nele você terá acesso a uma rede de apoio profissional para este momento.

[Buscar atendimento no SUS](#)



Gostaria de repetir o teste acompanhado de um profissional de saúde?

[Encontrar uma farmácia](#)



Se ainda tiver dúvidas, entre em contato:

SAC Chembio Gratuito

0800-887-1589

24horas/todos os dias

Ministério da Saúde

Disque saúde 136

Indicadores - Serviços Especializados

Estado: TODOS
 Município: TODOS
 Tipo de Serviço:


Serviço Especializado: SERVIÇO DE ATENÇÃO A DST/HIV/AIDS
 Classificação: CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA

Existem 514 registros na tabela - Mostrando página 1 de 3

CNES	Estabelecimento	CNPJ	CNPJ Mantenedora	Município
2788233	AMA UBS INTEGRADA PARQUE ANHANGUERA		46392130000380	SAO PAULO
2040573	AMBULAT DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL DIA DR RENATO RIGGIO JR		44733608000109	INDAIATUBA
3168727	AMBULATORIO DA UNIDADE PRISIONAL MATA GRANDE		03507415000144	RONDONOPOLIS
2237784	AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA		87958625000149	PORTO ALEGRE
9691723	AMBULATORIO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS		46578514000120	PERUIBE
3136388	AMBULATORIO DE DST AIDS		44573087000161	TUPA
2126540	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		18385088000172	MANHUACU
2073323	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE AMPARO		43465459000173	AMPARO
2754878	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR ANTONIO TEDESCO		46200846000176	LENCOIS PAULISTA
6430570	AMBULATORIO DE INFECTOLOGIA		90832619000155	CAMPO BOH
7806566	AMBULATORIO DE INFECTOLOGIA GESSIO MORI JARDINOPOLIS		44229821000170	JARDINOPOLIS
2034891	AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECTOCONTAGIOSAS		45780103000150	JUNDIAI
6903649	AMBULATORIO MEDICO MUNICIPAL SAE CTA		55356653000108	PRESIDENTE PRUDENTE
5266661	AMBULATORIO MUNICIPAL DE INFECTOLOGIA		68020916000147	BERTIJOGA
9578234	AMBULATORIO MUNICIPAL DE INFECTOLOGIA		76247378000156	UMUARAMA
3611701	AMBULATORIO VIDA		87530978000143	CACHOEIRA DO SUL
7856474	AMI AMBULATORIO MUNICIPAL DE INFECTOLOGIA		45176005000108	TAUBATE
2288907	APMIR	31460108000190		RESENDE
2173468	C T A		17749896000109	SAO JOAO DEL REI
2486458	CAAV CENTRO DE ATEN E APOIO A VIDA D DAVID CAPISTRANO FILHO		14239578000100	VITORIA DA CONQUISTA
2236303	CADI CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS		87334918000155	VENANCIO AIRES
3212270	CAIMI ADA RODRIGUES VIANA	00697295008858	00697295000105	MANAUS
2012049	CAIMI ANDRE ARAUJO	00697295008777	00697295000105	MANAUS
2242621	CASA TREZE DE MAIO		88488366000100	SANTA MARIA
0024600	CDI CENTRO DE DOENÇAS INFECCIOSAS DR LUIZ GONZAGA DE SOUZA		36504470000130	VOLTA REDONDA
5969018	CEAP CENTRO ESPECIALIZADO EM ACONSELHAMENTO E PREVENCAO		82892316000361	PALHOCA
2552868	CEDAP		83106357000115	BLUMENAU
4031415	CEDAP CENTRO EST ESPECIALIZADO EM DIAG ASSIST E PESQUISA		13937131000141	SALVADOR
5296730	CEDIC CTA		45787678000102	VALINHOS
2737396	CEDIP CENTRO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO PARASITARIAS		76208867000107	CASCATEL
6898847	CEN DE ARIJUA		56901275000150	ARIJUA
5657415	CENA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARACRUZ		27142702000166	ARACRUZ
0002186	CENAR SIQUEIRA CAMPOS		13128780000878	ARACAJU
2299860	CEMASAS		82915026000124	MARACAJA
9429727	CENCAM		04939756000151	MESQUITA
2675625	CENEAR		07810468000190	IGUATU
2493853	CENETRON PORTO VELHO	63761019000170	04287520000188	PORTO VELHO
2146169	CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO		16829640000149	ARAGUARI
2467925	CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DR EWALDO BORGES RES		24851511000185	PALMAS
2189941	CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADA IRIA DINIZ CAE IRIA DINIZ		18715508000131	CONTAGEM
2937425	CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADO		04012548000102	CRUZETIRO DO SUL
3456277	CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADO EM DST AIDS		09084815000170	PATOS
2126184	CENTRO DE CONVIVENCIA CAZUIZA		18715391000196	BETIM
5446503	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MURICI		12332953000136	MURICI
2020939	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAUDE DA MULHER		08366699000186	SANTANA
2032449	CENTRO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CEDIC DE PIRACICABA		46341038000129	PIRACICABA
6058256	CENTRO DE EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE ANITA GARIBALDI	19176461000300		MACAIBA
8989214	CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA		17947581000176	MURIAE
2105578	CENTRO DE ESPEC MEDICAS E ODONTO DR OVIDIO NOGUEIRA MACHADO		18309724000187	ITAUNA
6865240	CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ILHABELA		46482865000132	ILHABELA
2077027	CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL		09583958000127	ITAPEERICA DA SERRA
2054760	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE GARÇA		44518371000135	GARÇA
7791178	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAO JOSE DO SUL		04208358000165	SAO JOSE DO SUL
2415372	CENTRO DE ESPECIALIDADES DO CRATO		07587975000107	CRATO



- Ampliar o acesso a testagem
- Diagnosticar precocemente
- Iniciar o tratamento o mais rápido possível

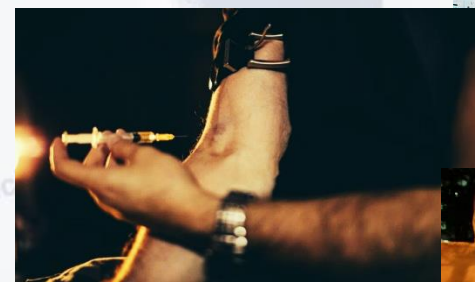

ESTRATÉGIAS




- Favorecer a ampliação da distribuição dos autotestes no serviço de saúde pública (ex.: UBSs e CTAs)
- Auxiliar na instalação e reforço de programas de testagem e autotestagem em populações vulneráveis ou acidentalmente expostas
- Reforçar os meios de divulgação com o incentivo à autotestagem (KOLs e influenciadores)
- Ampliar rede de clientes privados (farmácias, clínicas, laboratórios e hospitais)



ESTRATÉGIAS



- Criar novos formatos de venda
- Romper os preconceitos

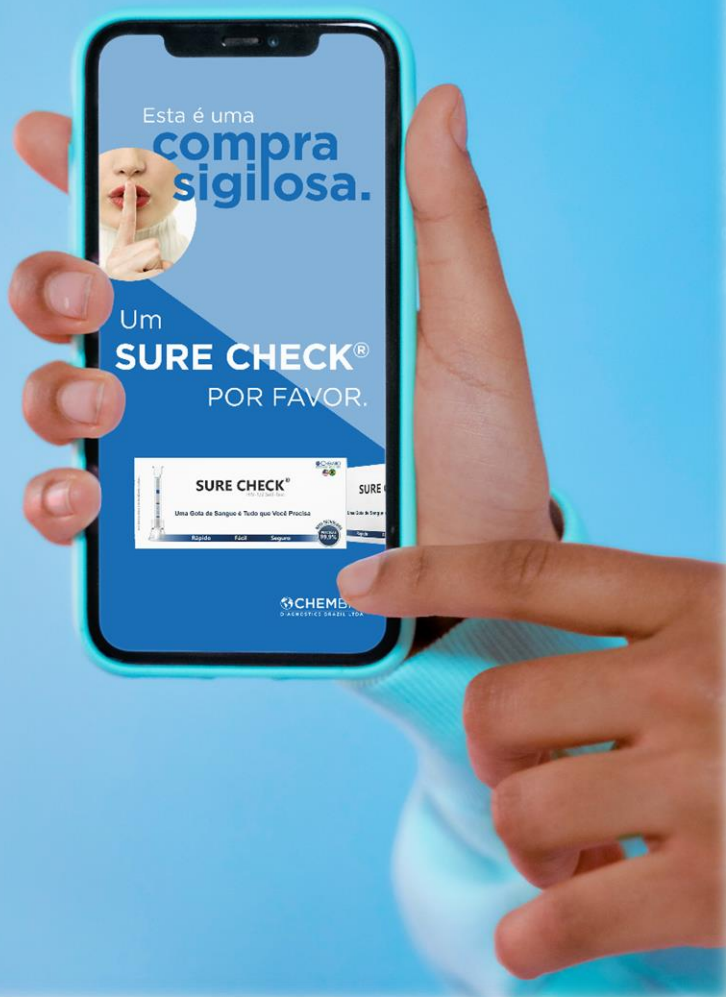

ESTRATÉGIAS



An FDA Approved, CLIA Waived[†] dual rapid test for the detection of antibodies to HIV 1/2 and *Treponema pallidum* in fingerstick whole blood, venous whole blood, or plasma specimens.

[†]CLIA Waived for fingerstick whole blood



DPP® HIV/SYPHILIS

- **Improved Patient Care** - Results within 15 minutes
- **Patient Friendly** - Two test results with one small blood sample, only 10µl
- **Perfect for Decentralized Testing**
- **Reliable** - Patented DPP® technology allows for higher sensitivity: >99%* for HIV and >94%* for *T. pallidum* antibodies

*Refer to product insert for details

Test for HIV & Syphilis in 3 Easy Steps with DPP®

Please refer to the product insert for details

1 Prepare

FINGERSTICK BLOOD

1 Prepare

2 Run

2 drops Sample + Buffer to Well 1

4 drops Running Buffer to Well 2

WAIT 5 MINS

WAIT 10 MINS

3 Read

Read results using the DPP® Micro Reader

HIV NON-REACTIVE (HVN-R)

HIV REACTIVE (HV-R)

T. pallidum NON-REACTIVE (TPN-R)

T. pallidum REACTIVE (TP-R)

INVALID (INV)









NOVO PORTFOLIO*



O **AMNIOQUICK® CARD** é um teste rápido para detecção de IGFBP-1 (proteína 1 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina – proteína placentária 12) – detectar a ruptura da membrana fetal em mulheres grávidas com essa suspeita..

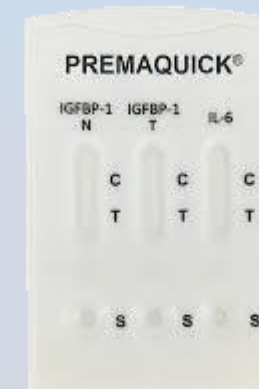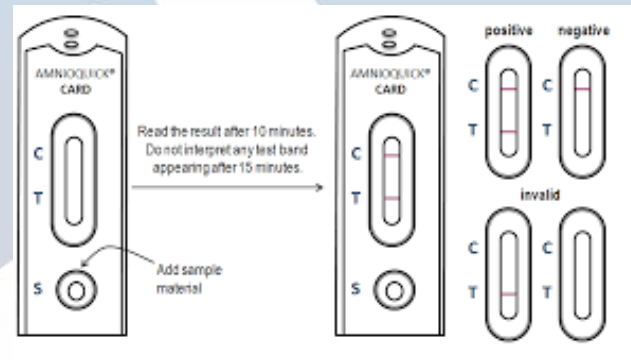

O **PREMAQUICK®** é um teste rápido desenvolvido para avaliar o risco de parto prematuro entre a 22ª e 37ª semana, através da combinação de três biomarcadores, que quando presentes nas secreções vaginais indicam: IGFBP-1 Nativo (marcador de trabalho de parto e de maturidade cervical), IGFBP-1 Total (Nativo + Fragmentado, resultante da atividade proteolítica local) e Interleucina 6 (marcador de inflamação/infecção da cavidade amniótica e cervical). A partir destas análises é possível prever ou determinar o risco de parto dentro de 7 a 14 dias.

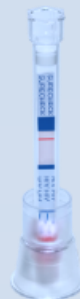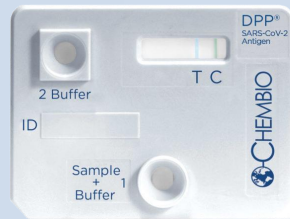

O QUE A CHEMBIO OFERECE:

- **Tecnologia DPP®**, testes amplamente utilizados pelo Ministério da Saúde/Bio-Manguinhos/Fiocruz
- **Sure Check® HIV**, teste Pré-Qualificado pela OMS (Qualidade, Segurança e Eficácia)

TRANQUILIDADE

QUALIDADE


CONFIABILIDADE

SEGURANÇA

RAPIDEZ DE RESULTADOS



ESTRATÉGIAS

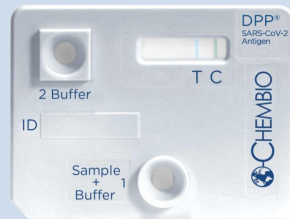

O QUE A CHEMBIO OFERECE:

- Capacitação profissional;
- Ampliação do portfólio de produtos (arboviroses, infecciosas, entre outros);
- Produtos diferenciados, novas tecnologias (maior valor agregado);
- Produtos de alta qualidade – elimina necessidade de nova testagem (redução de custo);
- Apresentações diferenciadas (5, 10, 20, 25 testes);
- Estratégias direcionadas às necessidades do mercado.



ESTRATÉGIAS



CHEMBIO

DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA